

SINCE 1889



Yamato



ヤマト科学

創業 130周年キャンペーン

デジタルマイクロ
スコープ (本体)

20台
限定

※無くなり次第終了となります。



デジタルマイクロスコープ
RH-8800

HIROX
JAPAN

※写真はハメコミ合成です。

お持ちのHIROX製品のアップグレードにお奨め!!

システム構成

RH-8800(本体) + レンズのアップグレード費用 (一部レンズを除く)

※レンズ、ステージはお客様がお持ちのモノをご使用ください。

今なら

50%off

通常価格

~~4,680,000~~ (税抜) 円

特別価格①

2,300,000 (税抜) 円

デジタルマイクロスコープを検討中のお客様に!!

システム構成

RH-8800(本体)

+レボズームレンズ(MXB-2500REZ)

+ST-AUTO-110(スタンド)

今なら

52%off

通常価格

~~8,380,000~~ (税抜) 円

特別価格②

3,980,000 (税抜) 円

※キャンペーンについてのお問い合わせは弊社営業所、販売代理店へご連絡ください。

ヤマト科学株式会社

デジタルマイクロスコープ RH-8800 **HIROX** JAPAN



新型CMOSカメラ

更なる使いやすさを求めて、高解像度CMOSカメラを搭載しました。レンズの持つ解像度を最大限に活かすだけでなく、レンズ情報を自動で読み取るACS機能※にも対応します。

メインユニット

ストレージは、SSDとHDD(記録エリア)を搭載し、ソフトのオペレーションが従来よりも飛躍的に速くなりました。ACS機能※により観察、計測、記録がより快適に操作できます。

レボズームレンズ

新型、高解像度CMOSカメラ搭載に伴いレンズもリニューアル。観察倍率は35~2500倍まで対応し、より鮮明でリアルな映像を実現。さまざまな光学アダプタにも対応しています。



◎写真はハメコミ合成です。

※ACS(Auto Calibration Select) 対象物を観察している倍率、視野、解像度、深度情報をリアルタイムに自動認識する機能です。


2D観察/計測

対象物の長さや面積、角度など多様な計測ニーズに応える21種類の計測ツールを搭載。計測項目ごとに統計データとして表示することも可能です。




3D観察/計測

平面観察(2D)では高低差が大きい被写体でも全焦点画像を作成し立体観察(3D)することで対象物のディテールまでも表現することができます。その他、粗さ計測(Ra,Rz,Rzjis)も可能です。

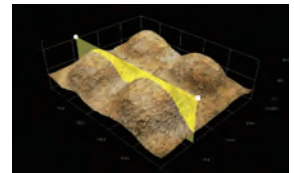


電動XYステージ

マウス操作でステージを自由に動かすことができます。電動スタンドとの組み合わせにより広範囲の3D画像連結(3Dタイリング)も簡単に構築します。

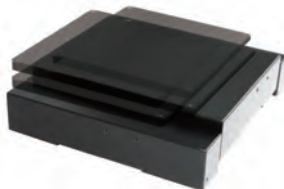

ポイント高さ計測

2D/3Dイメージの任意の位置にマウスを動かすだけで、リアルタイムで高さを表示、クリックすることで高さの値が画面上にメモのように貼り付けられます。

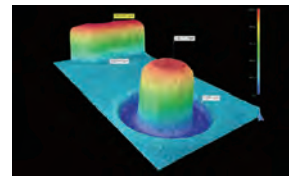

レボズームレンズ MXB-2500REZ

35~2500倍をレンズ交換無しに観察可能なレンズです。照明は暗視野、明視野、混合照明に対応しオールマイティにご使用いただけます。



注1.)レンズアップグレードが行えないレンズ型もありますので、ご使用中のレンズの型式を事前にご連絡ください。
注2.)特別価格①は、ご使用中のレンズ、スタンドによって機能に制限がありますので、お手持ちの製品型式を事前にご連絡ください。
特別価格②は全ての機能をご使用いただけます。

注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。製品化された際には、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

●仕様および外観は、開発中のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載しておりません。

SINCE 1889

科学技術の進歩・発展のために



ヤマト科学株式会社

本社: 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11 晴海トリトンスクエア Y棟 36階
分析機器営業部 (03) 5548-7120

www.yamato-net.co.jp

●お客様総合サービスセンター

☎ **0120-405-525** 携帯電話からは **0570-064-525**

【受付時間】9:00~17:30 ※土・日・祝日・振替休日を除く(12:00~13:00の間も受け付けております)

●営業・サービス拠点

札幌 (011)707-0371	筑波 (029)852-3411	東京 (03)5639-7071	川崎 (044)540-3751	長野 (026)291-6001	北陸 (076)443-8603	広島 (082)221-0921
仙台 (022)216-5701	北関東 (048)642-2569	東京北 (03)5939-4761	横浜 (045)828-1631	静岡 (054)288-9025	京滋 (075)646-5671	福岡 (092)263-7550
前橋 (027)280-4650	千葉 (043)241-7085	東京西 (042)352-3211	厚木 (046)224-6911	名古屋 (052)202-3051	関西 (06)6101-3112	

Copyright © Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

●お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ Cat.No:201908JT(1)P



このカタログの記載内容は2019年7月現在のものです。