

SINCE 1889



MASTERflex®
part of avantor

Masterflex モータ駆動部 (ポンプ) 07555 シリーズ 特別キャンペーン

通常価格

~~¥324,000~~ (税抜)

L/S
Series

今だけ
39% OFF!

キャンペーン価格

¥198,000 (税抜)



キャンペーン期間: **2026年8月1日**~

【250台限定】早い者勝ちの緊急キャンペーン! 250台到達次第終了!



メンテナンスが簡単

シンプルな設計により、チューブ交換のみでメンテナンスが完了。ダウンタイムを最小限に抑えます。



液体接触なしでコンタミ防止


液体はチューブ内のみを通過するため、ポンプ本体を汚染せず、クロスコンタミネーションのリスクを排除します。

チューブをしごくペリスタティック方式



国内サービス対応可能

ライセンスを持ったサービスマンによる修理や校正等も承っております。

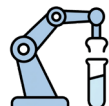


液体分注の省力化に貢献

手作業で行っていた薬品や溶剤の分注作業を半自動化、効率化が可能です。


用途で選べる2つの回転数モデル

07555-00 (高回転モデル)

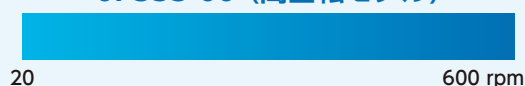

1.2 ~ 2900 ml/min
(L/S 13 & 36チューブ)

07555-10 (低回転モデル)

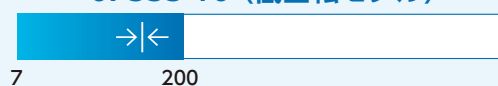

0.42 ~ 970 ml/min
(L/S 13 & 36チューブ)

この機会に Masterflex の実力をご体感ください!!

※本キャンペーンにはチューブ及びポンプヘッドを含んでおりません。機器の使用には別途ご購入下さい。
※デモ機でお試しいただく事も可能です。別途弊社販売代理店、または営業担当までご連絡下さい。

ヤマト科学株式会社

シンプルで回転数可変なエコノミータイプ

モータ駆動部

L/S シリーズ 研究用 / 標準タイプ

07555-00/07555-10



L/S
Series

- 回転数: 20~600rpm、7~200rpmの2機種をご用意しております。
- 流量: 1.2~2900mL/min (20~600rpm) (07555-00)
0.42~1130mL/min (7~200rpm) (07555-10)
- 回転数は大きなダイヤルにて簡単に調整可能です。
- 回転方向は方向スイッチにより、時計回り・反時計回りに変更可能です。
- 装備されたDB9メスコネクタで遠隔操作が可能。
- ローコストを実現した送液ポンプです。コントローラー体型です。
- 直流モータを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。
- 遠隔操作での回転/停止が可能です。

使用できるポンプヘッドの種類と取り付け個数

型 式	標準	イージロードII	イージロード	イージロードII	マルチチャンネル	PTFEチューブ	バルブ付チューブ
07555-00	1	1	1	1	使用不可		
07555-10	1~2	1~2	1~2	1~2	1	1	1

仕様

商品コード	型 式	回転数 (rpm)	回転数再現性	ポンプヘッド 取り付け可能数	モータ	寸法(幅×奥行×高さ) mm	電 源	重 量
07555-00-SALE26	07555-00	20~600	±5%	最大1	DC37W	183×230×134	AC90-260VAC 1.8A	4.26kg
07555-10-SALE26	07555-10	7~200	±5%	最大2				

ポンプヘッド1個当たりのチューブの送液量 (mL/min)

チューブ型式 本体型式	L/S13	L/S14	L/S16	L/S25	L/S17	L/S18	L/S15	L/S24	L/S35	L/S36
07555-00	1.2~36	4.2~130	16~480	34~1000	56~1700	76~2300	34~1000	56~1700	76~2300	96~2900
07555-10	0.42~12	1.4~43	5.6~160 (6.3~180)	12~330 (13~380)	20~570 (21~600)	27~770 (27~770)	12~330 (13~370)	20~570 (21~600)	27~770 (30~870)	34~970 (41~1130)

※1. L/S25用標準ヘッドはありません。※2. L/S15、24、35、36型チューブはマルチチャンネルポンプヘッドでは使用できません。※マルチチャンネルヘッドにはL/S36は使用できません。

Q&A Masterflex

Q. 機器を使用してみたいのですが、デモは可能ですか？

A. モーター駆動部(ポンプ本体)に加え、ヘッドやチューブもお貸出できます。実機で送液精度や操作性、チューブの耐薬品性をご確認いただけますので担当営業または販売代理店までご相談ください。

Q. ダイアフラムポンプとの違いは何ですか？

A. ダイアフラムポンプに比べ対応可能な薬剤、溶剤が豊富で、液体がチューブとしか接触しないため、掃除やオートクレーブなどの滅菌が不要です。



商品の詳細は
WEBへ



Avantor 社について

Avantor 社はバイオ医薬品製造市場における世界有数のサプライヤーで30ヵ国以上に200を超える拠点を展開しています。cGMP 製造施設 13拠点、ISO 準拠施設19拠点を有しておりラボ〜製造までバイオ医薬品の開発製造に必要なソリューションの提供をしています。



注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

●仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載していません。

SINCE 1889



科学・技術の未来のために

ヤマト科学株式会社

本 社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

お客様総合サービスセンター

0120-405-525

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp

メールでのお問い合わせは、ヤマト科学ウェブサイトより
受付しております



お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No: C2229A

<国内営業・サービス拠点>

札幌 (011)204-6780 仙台 (022)216-5701 前橋 (027)280-4650 筑波 (029)852-3411 埼玉 (048)642-2569 千葉 (043)241-7085 上海 重慶 北京 サンゼ
東京 (03)5827-3525 東京西 (042)352-3211 川崎 (044)540-3751 横浜 (045)828-1631 厚木 (046)224-6911 長野 (026)291-6001 廣州 西安 瀋陽 デュッセルドルフ
静岡 (054)653-0510 名古屋 (052)202-3051 北陸 (076)443-8603 京滋 (075)343-7201 関西 (06)6101-3112 広島 (082)221-0921 長沙
山口 (083)974-4760 福岡 (092)263-7550

Copyright © Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

このカタログの記載内容は2026年8月現在のものです。